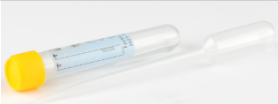



Verzamelen materiaal MMI / CDL

Pagina 1 van 4

Formulier A	Omschrijving materiaal	Onderzoek	Bewaarconditie	Foto
7	Boorzuur buizen	Midstream ochtend- of catheterurine Bacteriologische kweek bij verdenking UWI	4°C	
2	Uni swab sample kit	Uitstrijk van cervix, vagina of urethra Onderzoek op SOA: <i>C. trachomatis</i> (PCR) <i>N. gonorrhoeae</i> (PCR) <i>T. vaginalis</i> (PCR) Swab afbreken en in medium laten	4°C	
3	Urine sample kit (GEEL)	Urine Onderzoek op SOA: <i>C. trachomatis</i> (PCR) <i>N. gonorrhoeae</i> (PCR) <i>T. vaginalis</i> (PCR)	4°C	
4	eSwab	Uitstrijk van cervix, vagina of urethra Bacteriologische kweek; <i>N. gonorrhoeae</i> kweek Pus Bacteriologische kweek	4°C	
4	eSwab	MRSA/BRMO onderzoek MRSA: 1 eSwab voor keel 1 eSwab voor neus 2 eSwabs voor rectum 1 eSwab voor beide oksels en beide liezen	4°C	
1	Kweekpotje steriel	Sputum Bacteriologische kweek Huid/haar/nagel Schimmelkweek Semen Bacteriologische kweek	4°C 18 - 22°C 4°C	
N.v.t.	eSwab	herpes simplex / varicella zoster virus PCR	4°C	

Verzamelen materiaal MMI / CDL

Pagina 2 van 4

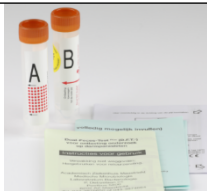Formulier A	Omschrijving materiaal	Onderzoek	Bewaar- conditie	Foto
5	Fecespotje	Feces Bacteriologische kweek Clostridium toxine bepaling (sneltest) <i>Helicobacter pylori</i> (antigeentest)	4°C	
6	DFT set (set van 2 faecespotjes; met en zonder SAF)	Feces Parasitologisch onderzoek (PCR en/of microscopie)	18 - 22°C	

<p>N.v.t.</p>	<p>Stolbuis (oranje dop)</p> <p>N.B.: per volle buis 5 testen mogelijk</p>	<p><i>Bordetella pertussis</i> (kinkhoest)</p> <p><i>Borrelia burgdorferi</i> (ziekte van Lyme)</p> <p>Cytomegalovirus antistoffen IgG+IgM</p> <p>Epstein Barr virus antistoffen IgG+IgM, monolatex</p> <p>Hepatitis A Ig (vaccinatie controle)</p> <p>Hepatitis A IgM antistoffen (diagnostiek)</p> <p>Hepatitis B antistoffen (anti HBs) vaccinatie</p> <p>Hepatitis B surface antigeen (HBsAg) + anti HBcore (diagnostiek)</p> <p>Hepatitis C antistoffen</p> <p>HIV (1+2) antistoffen +P24 Ag</p> <p>Rubella antistoffen IgG+IgM</p> <p><i>Toxoplasma antistoffen</i> IgG+IgM</p> <p><i>Treponema pallidum</i> (Lues serologie (TPHA))</p>	<p>4°C</p>	
<p>N.v.t.</p>	<p>Flexibele wattenstok</p>	<p><i>Bordetella pertussis</i> (kinkhoest)</p>	<p>4°C</p>	

Verzamelen materiaal MMI / CDL

Pagina 4 van 4

N.v.t.	Afnameset plakbandpreparaat/ Scotch tape	Parasitologisch onderzoek op aarsmaden	18 - 22°C	
---------------	--	--	-----------	---